



Deta
Elis
Holding

Υγεία
Καινοτομίες
Άνθρωπος

Συσκευή για την ενίσχυση των
ατομικών αμυντικών μηχανισμών
και την αποκατάσταση της
ψυχοσωματικής ισορροπίας του
ανθρώπου

DeVita
Energy

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΗ

Εγχειρίδιο • Οδηγίες χρήσης

Ονομασία συσκευής

Η συσκευή «DeVita Energy» εκπέμπει ήπια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, παρόμοια με αυτή που εκπέμπουν τα φυσικά οργανικά συστήματα.

Προορίζεται για την ενίσχυση των προστατευτικών δυνάμεων και την αποκατάσταση της φυσικής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε φυσικά βιοσυστήματα. Η δράση της βασίζεται στη χρήση συχνοτήτων που ανέπτυξαν οι R. Rife, R. Voll, F. Morell.

Προσοχή! Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μόνο υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα. Απαγορεύεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Τα άτομα με σωματική αναπηρία και διανοητική αναπηρία μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή υπό την επίβλεψη κατάλληλου προσωπικού.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Συσκευή «DeVita Energy».....	1 τεμ.
Εγχειρίδιο/Οδηγίες χρήσης.....	1 τεμ.
Συσκευασία.....	1 τεμ.
USB-καλώδιο φόρτισης.....	1 τεμ.
Λουράκι για τον λαιμό.....	1 τεμ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Αριθμός μονάδων σε τεμάχια.....	1
2. Εύρος συχνοτήτων σε Hz.....	0,1÷15000
3. Σφάλμα ρύθμισης συχνότητας, μεγαλύτερο από σε %	±0,003
4. Ελάχιστος χρόνος αδιάκοπης λειτουργίας σε ώρες.....	20
5. Τύπος ηλεκτρολογίου.....	αφής
6. Τύπος οθόνης.....	TFT 128x160
7. Τροφοδοσία:	
- Συσσωρευτής Li-Pol 3,7B, ενσωματωμένος στη συσκευή, τεμάχια.....	1
8. Μέγιστος χρόνος φόρτισης συσσωρευτή σε ώρες.....	6
9. Διαστάσεις σε χιλιοστά.....	102x44x15

10. Βάρος σε κιλά.....	0,1
11. Μέση διάρκεια εργοστασιακής λειτουργίας σε έτη.....	5

Πληροφορίες ασφαλείας

Συσκευή:

- Ασφαλής χρήση
- Μη τοξική
- Δεν είναι εύφλεκτη
- Δεν είναι εκρηκτική
- Δεν αποτελεί πηγή επικίνδυνης ακτινοβολίας

Κατά τη φόρτιση του συσσωρευτή, οι συσκευές που ανήκουν στην 3η γενιά τροφοδοτούνται αποκλειστικά από προσαρμογέα δικτύου ασφαλούς χαμηλής τάσης.

Προστασία του περιβάλλοντος

Ο ενσωματωμένος συσσωρευτής περιέχει ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Μετά τη λήξη του κύκλου ζωής της συσκευής και προτού την απορρίψετε, αφαιρέστε την μπαταρία. Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς χώρους. 

Οδηγίες φροντίδας, αποθήκευσης και μεταφοράς

Η συσκευή, όταν αφαιρεθεί από τη συσκευασία, πρέπει να αποθηκεύεται σε δωμάτιο με θερμοκρασία από 10 έως 35 °C και σχετική υγρασία 80%.

Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία και τις επιπτώσεις των δραστικών χημικών ουσιών.

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.


Προστατέψτε τη συσκευή από πτώσεις.

Φροντίστε να μην πέφτουν επάνω στη συσκευή άλλα αντικείμενα.

Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία της συσκευής για την περίοδο ισχύος της εγγύησης.

Περιγραφή της συσκευής


1. Κουμπί ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
2. Οθόνη
3. Υποδοχή φόρτισης
4. Πλήκτρα πλοήγησης
5. Πλήκτρο επιλογής
6. Πλήκτρο επιστροφής
7. LED εκτέλεσης προγράμματος

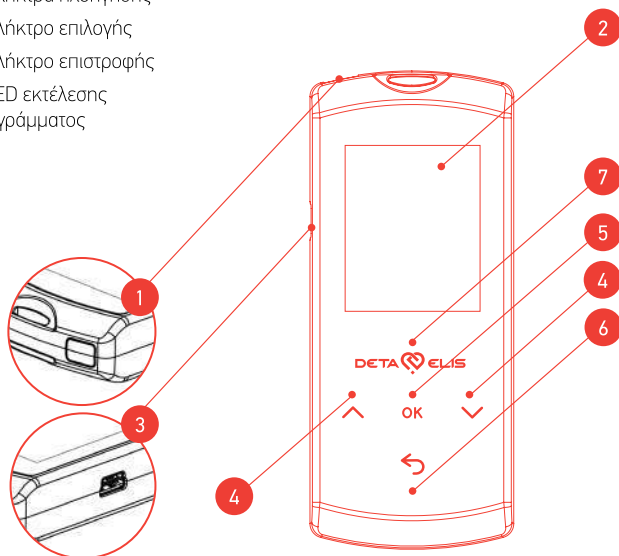

ΕΙΚ. 1

Χειρισμός της συσκευής

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο ❶. Η οθόνη θα παραμείνει αναμμένη για 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή του τελευταίου πατήματος κάποιου κουμπιού. Η οθόνη μπορεί να απενεργοποιηθεί νωρίτερα με ένα πάτημα του πλήκτρου ❶. Εάν η οθόνη σβήσει πριν εισαγάγετε τις απαραίτητες εντολές, πρέπει να την ενεργοποιήσετε πατώντας το πλήκτρο ❶.

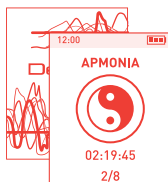


Μετά το πάτημα του κουμπιού **1 ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση** της συσκευής (εικ.1) η οθόνη ενεργοποιείται και μετά από 2 δευτ. η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα στη λειτουργία επιλογής προγράμματος.



Για μετάβαση στη λειτουργία ρύθμισης της συσκευής, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής.

Πλοήγηση στο κύριο μενού της συσκευής

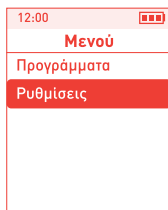

Υπομενού «Ρυθμίσεις»




Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε «Ρυθμίσεις»



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού «Ρυθμίσεις».

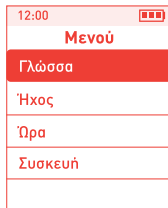

Επιλογή γλώσσας




Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε «Γλώσσα»



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού «Γλώσσα»

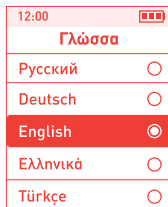



Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής



Για να επιστρέψετε στο υπομενού «Ρυθμίσεις», πατήστε το πλήκτρο επιστροφής

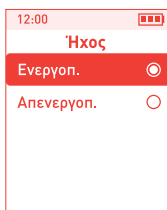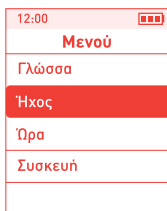

Ρύθμιση ήχου



Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε «Ήχος»



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού «Ήχος»



Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε «Ενεργοποίηση» ή «Απενεργοποίηση»




Πατήστε το πλήκτρο επιλογής



Για να επιστρέψετε στο υπομενού «Ρυθμίσεις», πατήστε το πλήκτρο επιστροφής

Εάν επιλέξετε «Απενεργοποίηση», απενεργοποιείται ο ήχος των πλήκτρων.

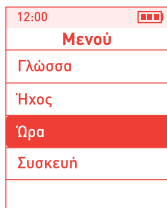

Ρύθμιση ώρας




Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε «Ώρα»



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού «Ώρα»

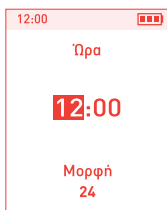


Με το πλήκτρο επιλογής επιλέξτε το πλαίσιο «Ώρες», «Λεπτά»



Με τα πλήκτρα πλοήγησης ρυθμίστε τις ώρες, τα λεπτά της ώρας



Για να επιστρέψετε στο υπομενού «Ρυθμίσεις», πατήστε το πλήκτρο επιστροφής

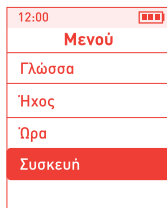

Συσκευή




Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε
«Συσκευή»



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός της συσκευής και η έκδοση του λογισμικού.

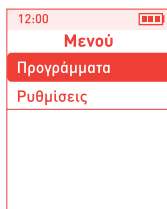


Υπομενού «Προγράμματα»



Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε
«Προγράμματα»



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

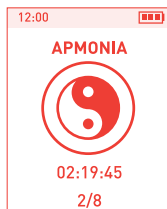


Επιλογή προγράμματος



Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε το
πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

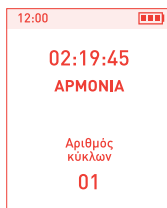

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το παράθυρο καθορισμού του αριθμού των κύκλων του προγράμματος.




Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για
να ορίσετε τον απαιτούμενο αριθμό κύκλων
λειτουργίας του προγράμματος




Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει, το οποίο θα σηματοδοτηθεί από ένα κόκκινο LED που αναβοσβήνει κάτω από το λογότυπο στον πίνακα της συσκευής.

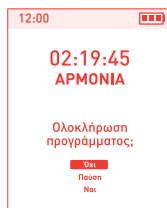


Στην οθόνη εμφανίζεται το υπομενού του τρέχοντος προγράμματος.

Το χρονόμετρο στο πάνω μέρος της οθόνης δείχνει τον χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος του προγράμματος.

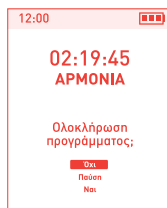

Πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος

Αν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος, πατήστε το κουμπί **1** ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού εκτέλεσης του προγράμματος

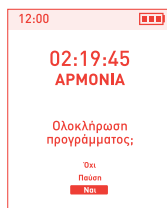

Διακοπή προγράμματος


Αν χρειαστεί να διακόψετε την εκτέλεση του προγράμματος



Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε την επιλογή «Ναι»



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

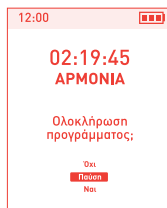


Αν χρειαστεί να κάνετε παύση στη λειτουργία του προγράμματος



Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε την επιλογή «Παύση»



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

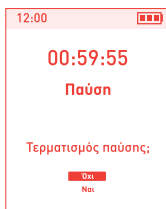

Στην οθόνη εμφανίζεται το υπομενού «Παύση»

Αν θέλετε να τερματίσετε την παύση



Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε την επιλογή «Ναι»



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

Εάν δεν πατήσετε την επιλογή «Ναι» στο ερώτημα «Τερματισμός παύσης;» η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 1 ώρα.

Χρήση της συσκευής κατά τη λειτουργία προγράμματος


Αμέσως μετά την έναρξη του προγράμματος, τοποθετήστε τη συσκευή με την πίσω πλευρά της στραμμένη σε εσάς, για παράδειγμα, στην τσέπη σας.

Φόρτιση συσκευής

Δείκτης στάθμης μπαταρίας

Εάν ο δείκτης στάθμης μπαταρίας είναι λευκός, δείχνει τρεις  ή δύο  εσωτερικές γραμμές, τότε η μπαταρία είναι φορτισμένη.

Εάν ο δείκτης στάθμης μπαταρίας είναι κόκκινος, δείχνει μόνο μία  εσωτερική γραμμή, τότε η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλή.

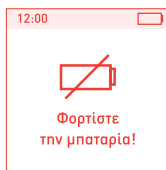

Εάν ο δείκτης στάθμης φόρτισης της μπαταρίας είναι κόκκινος, δεν δείχνει καμία εσωτερική γραμμή και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Φορτίστε την μπαταρία!», τότε η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως.

Φόρτιση της μπαταρίας

Σε περίπτωση χαμηλής φόρτισης της μπαταρίας ή σε περίπτωση αποφόρτισης, συνδέστε την υποδοχή mini-USB του καλωδίου στην υποδοχή φόρτισης/εγκατάστασης προγραμμάτων, και την υποδοχή USB στη θύρα USB ενός ενεργοποιημένου υπολογιστή. Ο δείκτης φόρτισης της μπαταρίας θα αρχίσει να δείχνει τη διαδικασία φόρτισης.

Εγγύηση του κατασκευαστή

Ο κατασκευαστής εγγυάται τη συμμόρφωση της συσκευής «DeVita Energy» με τις τεχνικές προδιαγραφές μόνον εφόσον ο καταναλωτής συμμορφώνεται με τις οδηγίες λειτουργίας, μεταφοράς και αποθήκευσης.

Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης είναι 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς από κατάστημα λιανικής πώλησης.

Σε περίπτωση απουσίας της ημερομηνίας πώλησης και της σφραγίδας του πωλητή στο εγχειρίδιο, η περίοδος εγγύησης υπολογίζεται από την ημερομηνία κυκλοφορίας της συσκευής από το εργοστάσιο του κατασκευαστή.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο ιδιοκτήτης δικαιούται δωρεάν επισκευή. Οι επισκευές στα πλαίσια της εγγύησης πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Οι αποστολές της ελαττωματικής συσκευής για επισκευή πραγματοποιούνται από τον αγοραστή.

Αν η βλάβη αφορά το σώμα της συσκευής ή/και σε περίπτωση μη ύπαρξης της κάρτας εγγύησης, οι απαιτήσεις του αγοραστή δεν γίνονται αποδεκτές και η επισκευή δεν πραγματοποιείται.

Η εγγύηση δεν ισχύει για τις ακόλουθες ζημιές:

- Ελαττώματα που προκαλούνται από κακό χειρισμό;
- Ελαττώματα που προκαλούνται από φυσικές φθορές;
- Παραβίαση των σφραγίδων ασφαλείας;
- Όταν υπάρχουν εξωτερικά ελαττώματα (ρωγμές, χτυπήματα κλπ.).

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει την ελαττωματική συσκευή με νέα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- η συσκευή έχει επισκευαστεί τρεις φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης
- η συσκευή δεν μπορεί να επισκευαστεί

Προσοχή! Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, χωρίς ειδοποίηση, το σχεδιασμό της συσκευής και το λογισμικό χωρίς να επηρεάζονται τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά

Μεθοδολογία

Η ιδέα για την ύπαρξη ενέργειας στον οργανισμό και το γεγονός ότι η υγεία εξαρτάται από τη ροή της, εκφράστηκε για πρώτη φορά από αρχαίους ιατρούς της Κίνας, της Ινδίας και της Αιγύπτου. Σήμερα έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι κάθε όργανο εκπέμπει κάποιες συγκεκριμένες συχνότητες. Οι δυσμενείς εξωτερικοί παράγοντες, η γεμάτη άγχη καθημερινή ζωή, οι κακές συνθήκες του περιβάλλοντος αποσυντονίζουν τους φυσιολογικούς ρυθμούς των συχνοτήτων, με αποτέλεσμα συμπτώματα όπως η κατάθλιψη, η απάθεια και η χρόνια αϋπνία.

Η συσκευή «DeVita Energy» εκπέμπει αρμονικές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, οι οποίες εξισορροπούν τους βιοενεργειακούς δείκτες του ανθρώπινου οργανισμού, ενεργοποιούν τις λειτουργίες ρύθμισής του, που βασίζονται σε αντανάκλαστικά φαινόμενα, και μειώνουν τις βιοπαθολογικές και γεωπαθητικές επιβαρύνσεις στον οργανισμό. Η συσκευή «DeVita Energy» επιδρά ήπια και με ασφάλεια στον οργανισμό χωρίς να καταστρέφει την ενεργειακή ισορροπία του, συνολικά ή μεμονωμένα.

Αυτή η μέθοδος επίδρασης στον οργανισμό βασίζεται στις ανακαλύψεις του Franz Morell, εφευρέτη της θεραπείας του βιοσυντονισμού. Το 8 ειδικά προγράμματα ηλεκτρομαγνητικής επίδρασης αποκαθιστούν και ενισχύουν τους φυσιολογικούς δείκτες, ανακουφίζουν από την ψυχολογική και συναισθηματική φόρτιση τονώνοντας τον οργανισμό με ενέργεια, χαρίζοντας καλή διάθεση και υγεία.

Προσοχή! Η χρήση της συσκευής αντενδείκνυται σε εγκύους κατά τους τρεις πρώτους μήνες της κύησης, σε άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνων καθώς και σε άτομα με βαριές καρδιολογικές παθήσεις.

Προγράμματα «DeVita Energy»

Πρόγραμμα «Αφθονία». Χρόνος λειτουργίας – 2:17.

Περιγραφή: οι άνθρωποι έχουν πάντα ορισμένες περιοριστικές πεποιθήσεις, φόβους που δεν καθιστούν δυνατή την απόλαυση του οικονομικού πόρου ή τη σωστή διαχείριση του. Από αυτήν την άποψη, προκύπτουν φόβοι: ο φόβος της απώλειας και ο φόβος των χρημάτων (μπορούν επίσης να κλαπούν και αν αποκτηθούν εύκολα, τότε προκύπτει ένα συγκεκριμένο σύμπλεγμα ενοχής). Όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν έντονη ένταση, άγχος και άλλες συναισθηματικές εμπειρίες που αντανακλώνται στο σώμα μας. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην ευθυγράμμιση της στάσης απέναντι στα χρήματα, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες ενός ατόμου. Επιπλέον, επηρεάζει την αλλαγή στάσεων απέναντι σε υλικά αγαθά και συνεργασίες, προωθεί την αποκάλυψη δημιουργικών ικανοτήτων.

Εφαρμογή: εάν απαιτείται, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά σε συνδυασμό με τα προγράμματα της συσκευής «DeVita Energy»: «Συναισθηματική ισορροπία», «Υγεία», «Αρμονία».

Πρόγραμμα «Αρμονία». Χρόνος λειτουργίας – 2:19.

Περιγραφή: το πρόγραμμα έχει ευεργετική επίδραση στο νευρικό σύστημα, εξισορροπεί την ψυχο-συναισθηματική κατάσταση, βοηθά στην άρση των κρυφών περιορισμών, των υποσυνείδητων αρνητικών πεποιθήσεων, των φόβων. Βοηθά στη βελτίωση του ύπνου, στην απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού, το οποίο σας επιτρέπει να επιτύχετε τους στόχους με τον καλύτερο τρόπο, δίνει θετική ενέργεια.

Εφαρμογή: το δεύτερο βασικό πρόγραμμα ευεξίας, που χρησιμοποιείται καθημερινά σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Υγεία».

Πρόγραμμα «Προστασία». Χρόνος λειτουργίας – 1:42.

Περιγραφή: δουλεύοντας με ανθρώπους, μπορεί συχνά να αντιμετωπίσετε αρνητικά συναισθήματα: πονοκέφαλος, επιθετικότητα, κατάθλιψη, απώλεια όρεξης, προβλήματα με σχέσεις κ.λπ. Όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε λειτουργικές διαταραχές.

Το πρόγραμμα δημιουργεί μια εξαιρετική ασπίδα κατά της αρνητικής ενέργειας και δεν επιτρέπει να βλάψει την υγεία και τη διάθεση σας.

Είναι χρήσιμο για άτομα των οποίων οι ειδικότητες σχετίζονται με την εργασία σε μεγάλες ομάδες (γιατροί, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί).

Εφαρμογή: το πρόγραμμα χρησιμοποιείται, εάν είναι απαραίτητο.

Πρόγραμμα «Υγεία». Χρόνος λειτουργίας – 2:59.

Περιγραφή: το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη διατήρηση του σώματος σε λειτουργικό επίπεδο, την αποκατάσταση του ενεργειακού δυναμικού των κατεστραμμένων οργάνων και την αναζογόνηση.

Εφαρμογή: το πρώτο βασικό πρόγραμμα ευεξίας, που χρησιμοποιείται καθημερινά σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Αρμονία».

Πρόγραμμα «Σιλουέτα». Χρόνος λειτουργίας – 1:01.

Περιγραφή: Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξάλειψη ψυχοσωματικών αιτιών που είναι παράγοντες αύξησης βάρους. Το υποσυνείδητο μυαλό μας μπορεί να προκαλέσει υπερκατανάλωση τροφής και, ως αποτέλεσμα, την απόθεση επιπλέον κιλών σε απάντηση στο ψυχο-συναισθηματικό άγχος, που προκαλείται από συγκρούσεις στην οικογένεια, στην εργασία, στο σπίτι και στη συναισθηματική

δυσαρέσκεια. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα είναι χρήσιμο για άτομα που θέλουν να αυξήσουν το βάρος τους, καθώς δίνει μια αίσθηση εσωτερικής ηρεμίας, χαράς, η οποία συμβάλλει στη διαδικασία της σωστής πρόσληψης τροφής και της πλήρους αφομοίωσής της.

Εφαρμογή: εάν απαιτείται, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά σε συνδυασμό με τα προγράμματα της συσκευής «DeVita Energy»: «Συναισθηματική ισορροπία», «Υγεία», «Αρμονία».

Πρόγραμμα «Μακροζωία». Χρόνος λειτουργίας – 1:15.

Περιγραφή: το πρόγραμμα συμβάλλει στη διατήρηση του γενικού επιπέδου υγείας σε καλά επίπεδα, βοηθά στην προστασία του DNA από τις αρνητικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από οικιακές συσκευές, το δίκτυο Διαδικτύου κ.λπ. Ως αποτέλεσμα, η ποσότητα της ζωτικής ενέργειας, η διαύγεια του μυαλού, η συνείδηση αυξάνεται, η διάθεση για υγιεινό τρόπο ζωής και οι δημιουργικές ικανότητες ενεργοποιούνται.

Εφαρμογή: εάν απαιτείται, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά σε συνδυασμό με τα προγράμματα της συσκευής «DeVita Energy»: «Υγεία», «Αρμονία».

Προσοχή! Τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας του προγράμματος, μπορεί να υπάρχει: ελαφρά ζάλη, ναυτία, υπνηλία.

Πρόγραμμα «Συναισθηματική ισορροπία». Χρόνος λειτουργίας – 1:16.

Περιγραφή: χρησιμοποιείται για την εναρμόνιση των σχέσεων - στην οικογένεια, μεταξύ συντρόφων, φίλων, για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Αυτό το πρόγραμμα διευρύνει τις ευκαιρίες για επικοινωνία, αμοιβαία κατανόηση, ανοχή και αγάπη, βοηθά στην εξάλειψη των συγκρούσεων. Δίνει μια αίσθηση ενότητας με τον κόσμο. Για τους εσωστρεφείς, θα είναι χρήσιμο για την απελευθέρωση εσωτερικών «φραγμών» και για την απελευθέρωση της δημιουργικότητας.

Εφαρμογή: εάν είναι απαραίτητο, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά σε οποιονδήποτε συνδυασμό με άλλα προγράμματα της συσκευής «DeVita Energy».

Πρόγραμμα «Ενέργεια». Χρόνος λειτουργίας – 0:41.

Περιγραφή: Το πρόγραμμα ενεργοποιεί τον οργανισμό, δίνει δύναμη, έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα, προστατεύει από βιο- και γεωπαθογόνους παράγοντες.

Εφαρμογή: εάν είναι απαραίτητο, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά σε οποιονδήποτε συνδυασμό με τα άλλα προγράμματα της συσκευής «DeVita Energy».

Οδηγίες χρήσης της συσκευής «DeVita Energy»

Η συσκευή συνιστάται για όλους όσους βιώνουν:

- Επιβλαβείς επιπτώσεις της πόλης και του περιβάλλοντος
- Σωματική και συναισθηματική κόπωση
- Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης
- Μεγάλη σωματική δραστηριότητα
- Κατάθλιψη, άγχος, ευερεθιστότητα
- Ζάλη, αδυναμία, υπνηλία

Αποτελέσματα μετά τη χρήση της συσκευής «DeVita Energy»:

- Αποκαθιστά και ενισχύει τη φυσιολογική απόδοση
- Ανακουφίζει το ψυχο-συναισθηματικό άγχος
- Αφαιρεί τους ψυχοσωματικούς περιορισμούς
- Φορτίζει με ενέργεια και θετικότητα
- Ξεκινά τις λειτουργίες αυτορρύθμισης του οργανισμού
- Ρυθμίζει τις λειτουργίες αποτοξίνωσης του οργανισμού
- Μειώνει τα βιο- και γεωπαθογόνα φορτία
- Προστατεύει από την ηλεκτρομαγνητική αιθαλομίχλη
- Αναζωογονεί

Συμπέρασμα

Η έννοια Wellness, δηλαδή η σωστή διατροφή, η καλή σωματική άσκηση, ο

καθαρός αέρας, η εξάλειψη κακών συνθηκών, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πολλών ασθενειών. Ωστόσο, σήμερα δεν είναι πάντα εφικτό να ακολουθεί κανείς έναν τέτοιο τρόπο ζωής και ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις με το μόνιμο άγχος, το φιλόδοξο τρόπο ζωής και τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

Οι συσκευές «DeVita Energy» δημιουργήθηκαν με σκοπό να βοηθήσουν τον οργανισμό στην αποκατάσταση της χαμένης ενέργειας, στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και στην τόνωση της ψυχικής υγείας.

Όσο υψηλότερα τα επίπεδα της ενέργειας στον άνθρωπο κι όσο καλύτερη είναι η κατάσταση της υγείας του, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να χτίσει τη ζωή του όπως την επιθυμεί.